



## Lift – trygg förflyttning till och från toalettstolen

Vår Lift är ett omtyckt hjälpmedel hos människor som är i behov av hjälp vid förflyttning till och från toalettstolen. Lift är batteridrivnen och kan användas i både plant och tiltat läge (8 graders lutning), vilket ger ett tryggt stöd från sittande till stående, samt vid förflyttning mellan rullstol och toalettstol. Med ett enkelt handgrepp skiftar man mellan de två lägena. Tack vare den mycket goda lyfthöjden blir stödet kraftfullt hela vägen.

Lift är enkel att installera och sköta, materialvalet är anpassat för badrumsmiljöer. Lift fungerar utmärkt tillsammans med Bidette och andra hjälpmedel från Svan Care.

Lift finns i två modeller: Golvmodell och vägghängd modell. Se följande uppslag.

## Från sittande till stående

När Lift är i sitt nedersta läge är sitsen plan. Vid uppresning lutar sitsen något framåt. Vägen upp till stående blir då behagligt följsam för kroppen samtidigt som användaren hela tiden har golvkontakt. På samma sätt används Lift när användaren ska gå från stående till sittande.



## Från och till rullstol

Sitsen låses i det plana läget. Därefter höjer eller sänker användaren sitsen till den höjd som gör förflyttningen mest bekväm och enkel.

## Därför väljer användarna Lift

- Den väl tilltagna lyfthöjden (95 cm) ger stöd hela vägen upp till stående, även för den som är lång.
- Lift kan användas både i plant och vinklat läge.
- Lyfter upp till 160 kilo.
- Uppfällbara armstöd.
- Enkel att installera.
- Enkel att rengöra.
- God design.
- Batteridriven.
- Sittplanet kan vinklas 8 grader.

# Lift



LIFT GOLVMODELL



LIFT GOLVMODELL,  
ART. NR. 10 701

Golvmodell som ställs direkt på badrumsgolvet. Liften fästs med beslag på toaletten.



LIFT VÄGGMODELL,  
ART. NR. 10 702


Vägghängd modell som fästs med väggbeslag på badrumsväggen. Frigör därmed golvyta som kan behövas för exempelvis rullstol.

#### Data:

- Maximal lyftkraft 160 kg
- Lyfthöjd 950 mm
- Totalvikt 31 kg (20 + 11 kg)
- Batteridrift

#### Kan kombineras med:

- Bidette
- Gripo Alu

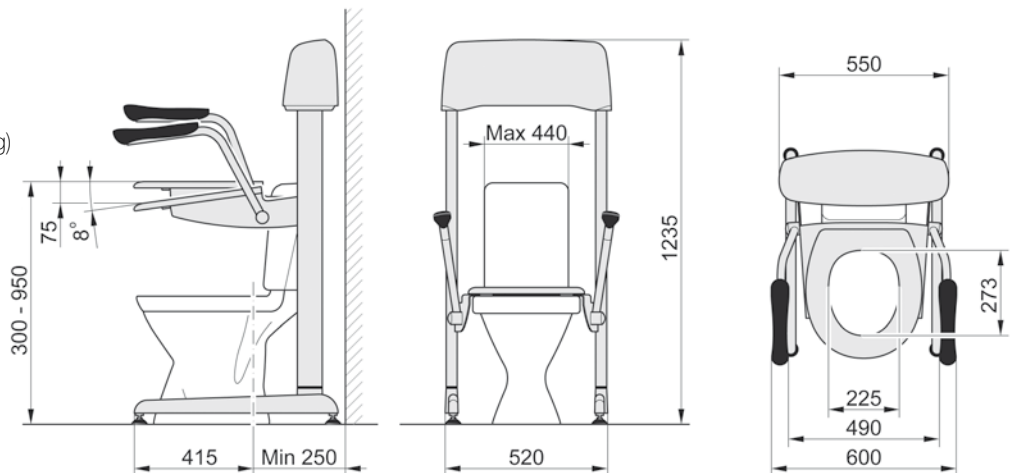

#### Tillbehör:



Art. nr. 10 399



Art. nr. 10 871



Ring för information

